

PROCEDURE CHANGEMENT DU VERIN ASSITANT AMBULATOIRE



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces.....	3
2. Démontage	3
3. Remontage.....	7

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement du vérin HV, il vous faut :

- Un jeu de clé Allen
- Un jeu de clé Torx
- Un jeu de clé à pipe
- Frein filet bleu et vert
- Décapeur chauffant (au besoin)

Temps de l'intervention : 20-25 Min


2. Démontage

Placez-vous dans un endroit adapté. Pour changer le vérin de hauteur variable.

Dans un premier temps, enlever le plateau blanc.



Pour cela dévisser les 4 vis avec une clé Torx de 3.

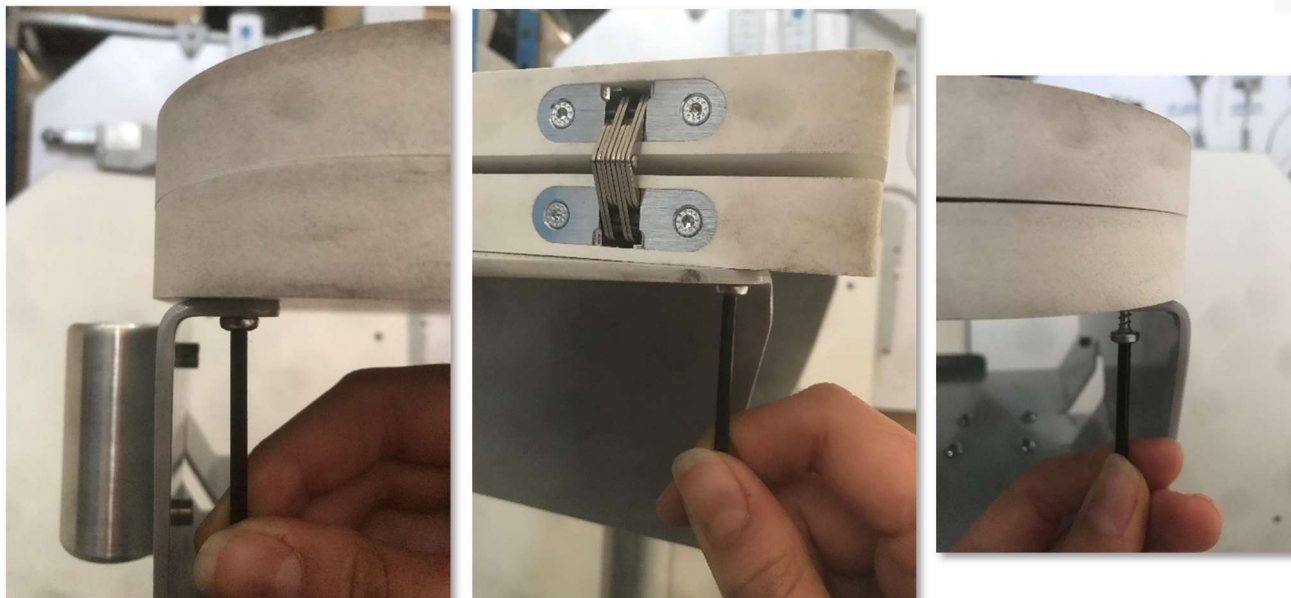

Retirer le plateau, le mettre de côté avec les vis.



Procéder au dévissage de la tôle, repérer les 4 vis puis enlever les à l'aide d'une clé Allen. Veillez à maintenir la tôle lors du dévissage afin d'éviter qu'elle tombe. Les vis risquent d'être difficile à retirer car présence de frein filet, pour plus de facilité, nous vous conseillons de chauffer la colle à l'aide d'un décapeur thermique.

Une fois que cela est terminé, mettez votre tôle ainsi que les vis de côté.




Retirer la petite tôle comme photo ci-dessous.




Pour plus de confort, nous vous conseillons de vous installer sur une table.

Procédez au dévissage des 5 branches de l'assistant, avec une clé Allen de 4, au besoin chauffer la colle.

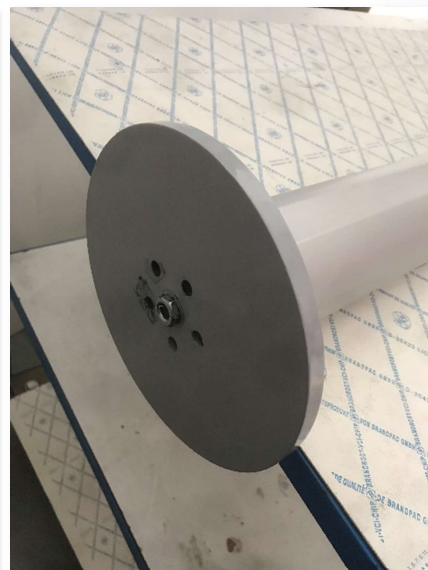

Une fois les 5 branches retirées, dévisser l'écrou central qui maintient le vérin de hauteur variable.

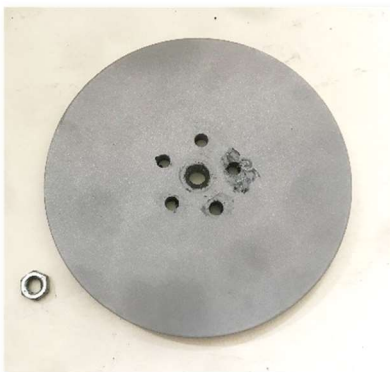

Une fois cette étape terminée, prendre la colonne, positionnez-vous au sol puis tapez un coup sec sur la tige du vérin afin de le débloquent, puis retirer le à la main. Voir photos




3. Remontage

Prendre votre colonne en aluminium, sortir légèrement l'axe central pour permettre la fixation du pied.




Prendre votre nouveau vérin, et glisser le dans votre colonne en faisant attention à son sens, le tourner afin de faire passer la manette du vérin dans la fente de la colonne (photo ci-dessous)

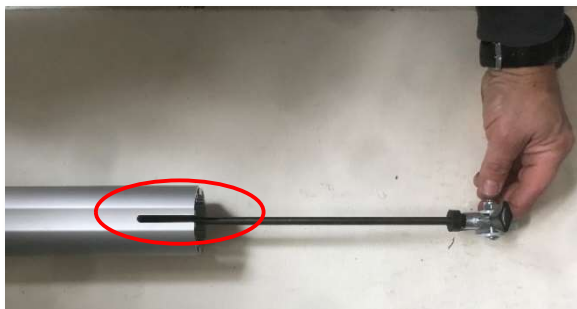

Placer le disque sur l'axe du vérin. Utiliser du frein filet vert sur la tige filetée puis ajouter l'écrou, visser-le avec une clé de 13 en maintenant le vérin.




Une fois cette étape réalisée, vous allez procéder au remontage des 5 branches. Pour cela centrer dans un premier temps votre disque avec les trous de perçage de la colonne (voir la photo ci-dessous)

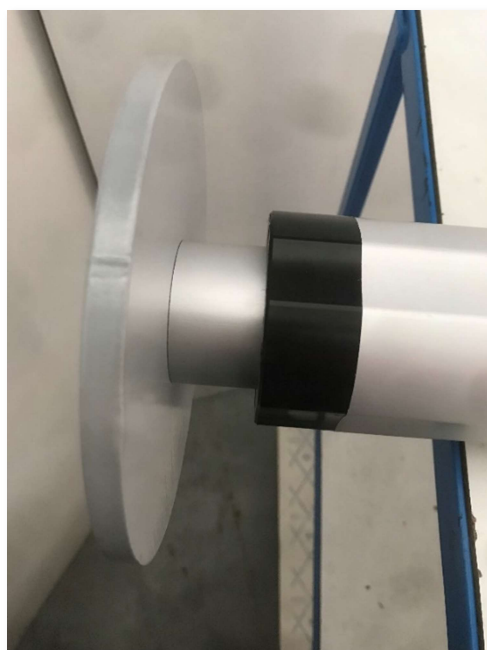

Ensuite afin de faciliter le montage des étoiles, il est préférable de fixer au moins 2 vis.




Procédez à la fixation de la première branche, pour cela utiliser du frein filet bleu sur la vis (BHC M6x30), visser la première branche dans la colonne, en veillant à aligner les trous du disque à la colonne.

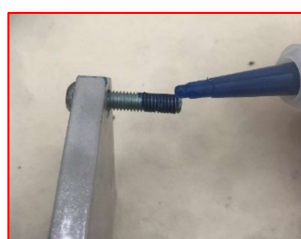


FREIN FILET BLEU



Veiller à aligner les bords du disque à ceux de la colonne (voir photos)

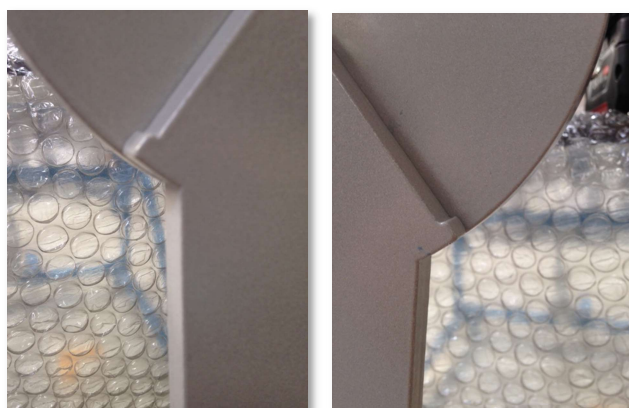

Répéter l'action pour les 3 autres branches, enlever les 2 vis puis compléter avec les 2 branches restantes.

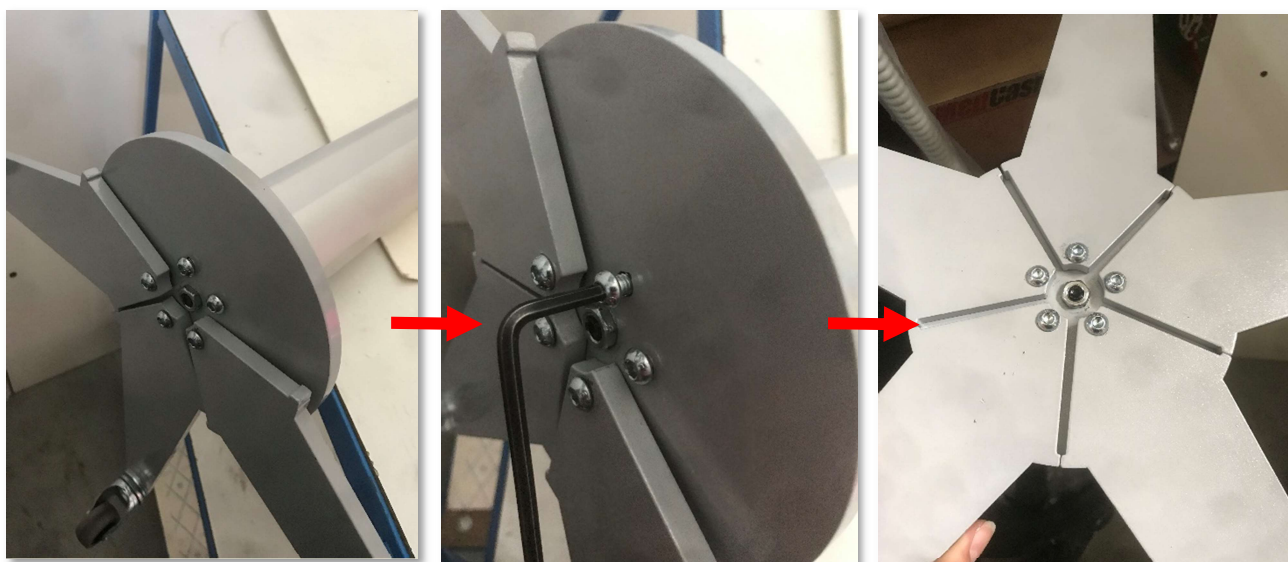

Une fois cette étape terminée, positionnez-vous au sol. Tester la bonne fonctionnalité du vérin en activant la manette. Une fois que tout semble fonctionner, descendre le vérin au plus bas afin de placer la tôle.



Prendre du frein filet bleu, en mettre en petite quantité dans le taraudage de la colonne, photo ci-dessous.



Prendre la tôle supérieure (support plateau) et placer la sur la colonne.
/!\ au sens de la tôle veillez à ce que l'encoche soit du côté de la manette, comme photo ci-dessous.



Une fois que vous vous êtes assuré de la bonne position de la tôle, vissez-la avec vis BHC M6X30.



Dernière étape, positionner le plateau en respectant l'alignement avec la tôle et le sens.
Les charnières du plateau doivent être du côté de la poignée (voir photo)



Ensuite procédez au vissage des 4 vis (ASSY 4x16 BC)



CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux