

PROCEDURE D'INSTALLATION ARRETS MATELAS SUPPLEMENTAIRES AUX PIEDS



 SOMMAIRE

1. Préparation outillage et pièces..... 3
2. Démontage 3

1. Préparation outillage et pièces



Pour procéder au changement de vérin, il vous faut :

- Jeu complet de clés plates
- Jeu complet de clés Allen
- Perceuse
- Foret type Carrelage (pour ne pas éclater le plan dur)
- Foret métaux
- Fraise à étage


Mais également les pièces nécessaires à l'installation :

- Vis
- Ecrou borgne
- Arrêt matelas X2

Temps de l'intervention : 20 Min

2. Démontage

Pour commencer, démonter le plan dur en dévissant les 6 écrous borgne + vis M6.

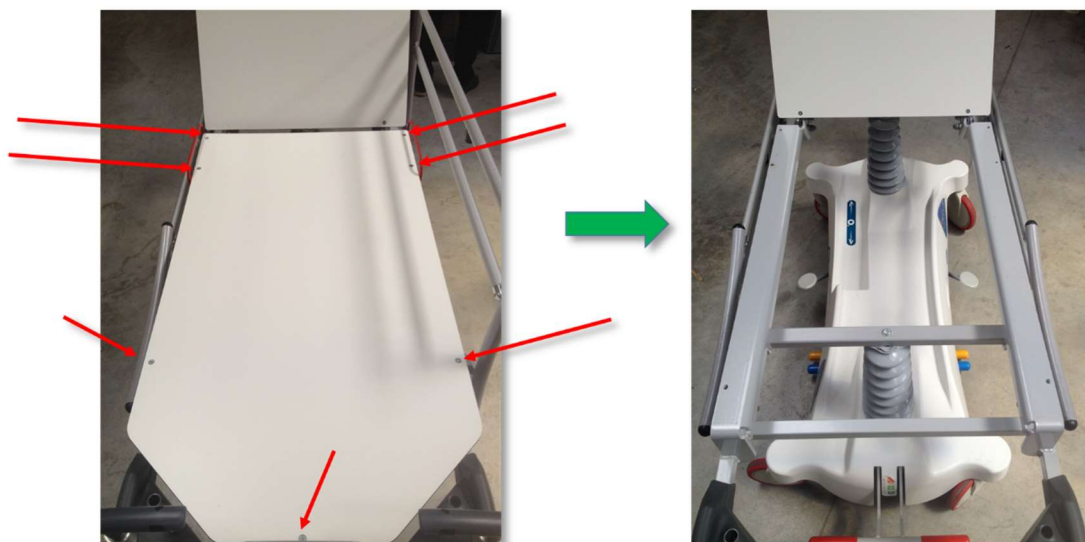


Prendre uniquement le plan dur. La première étape consiste à percer 2 trous supplémentaires comme indiqué sur le plan avec un foret diamètre 6mm (idéalement forêt carrelage pour éviter les éclats de résine et à petite vitesse). Pour vous aider à positionner et percer, prendre l'arrêt matelas comme gabarit et mettre une vis + écrou pour le fixer d'un côté.

Pour éviter que l'arrêt matelas tourne lors du perçage, utiliser une pince étau.



Puis percer, doucement :

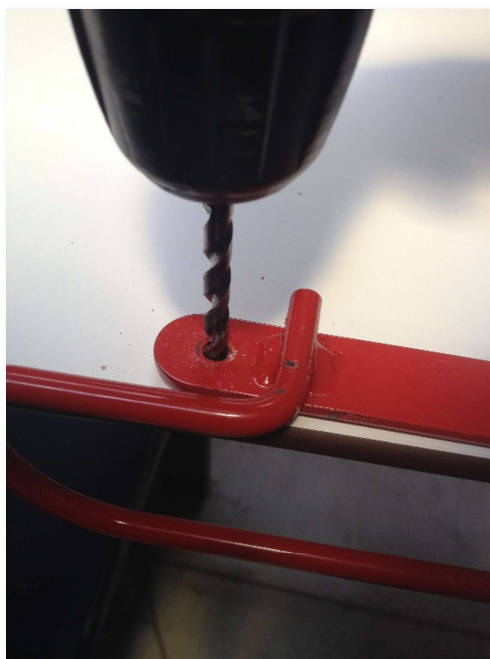

Pour pouvoir mettre la vis à tête fraisée, il faut faire un fraisage, à l'aide d'une fraise étagée, d'une profondeur de 3mm environ (voir plan).



Réaliser la même chose de l'autre côté.

Il faut désormais percer le couchage métallique. Pour cela, refixer le plan dur à l'aide des 5 vis, comme ci-dessous, pour le maintenir en position sur le couchage.

Prendre un pointeau et marquer la tôle avant perçage pour être correctement dans l'axe lors du perçage. Prendre un foret métaux et reprendre les nouveaux trous de perçage du plan dur pour percer la tôle de chaque côté.



Nettoyer correctement les bavures en dessous.

Vous pouvez positionner l'arrêt matelas par-dessous et le fixer.



CONTACT

**Mail**

sav@bmb-medical.com

**Téléphone**

04 74 08 71 73

**Site internet**

<http://www.bmbmedical.com/>

**Espace client**

<http://bmb-ubicx.com>

**Adresse postale**

100 avenue du Formans, 01604 TREVoux