

CLICK & MOVE

Tracteur motorisé pour brancards et fauteuils
SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT





Click & Move
*Tracteur motorisé
par roue autonome*

DESCRIPTION

Click & Move est un tracteur motorisé par roue autonome électrique.

Complément idéal d'un parc important en Ambulatoire, Click & Move nécessite un pré-équipement sur les produits à tracter (qui peut se monter sur parc existant) et permet de faciliter le brancardage sans motoriser tous les produits. Il s'adapte exclusivement aux produits BMB MEDICAL.

Largeur hors tout : 61 cm.
Longueur hors tout : 78 cm.
Hauteur hors tout : 121 cm.
Poids : 65 kg.
Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques Click & Move

Tracteur motorisé par roue autonome.

Batterie intégrée. Autonomie 15 kms. Temps de charge : 5 h.

Batterie lithium sans effet mémoire.

Chargeur intégré.

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse.

Connexion activée par pédale sur le produit à déplacer.


Nécessite un système de connexion sur le produit disponible en post-montage.

5ème roue obligatoire.

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg



Vue sur roue autonome avec batterie intégrée.

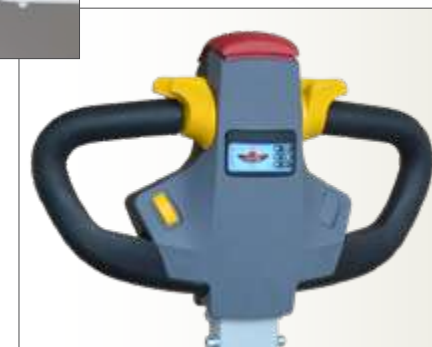

Vue sur Commande par poignée rotative avec accélération progressive.




Click & Move



100 Av. du Formans - CS 11001
01604 TREVoux Cedex
FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 08 71 71
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72
E-mail : info@bmb-medical.com
www.bmb-medical.com

© 2015 -  - Tél. 06 77 96 82 22 / www.krea-communication.fr

