

DIUAN D'EXAMEN




Notre gamme "DIVAN D'EXAMEN" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des manques en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.

SOMMAIRE

- ▶ DIVIA
- ▶ DIVIA MIXTE
- ▶ NUANCIER

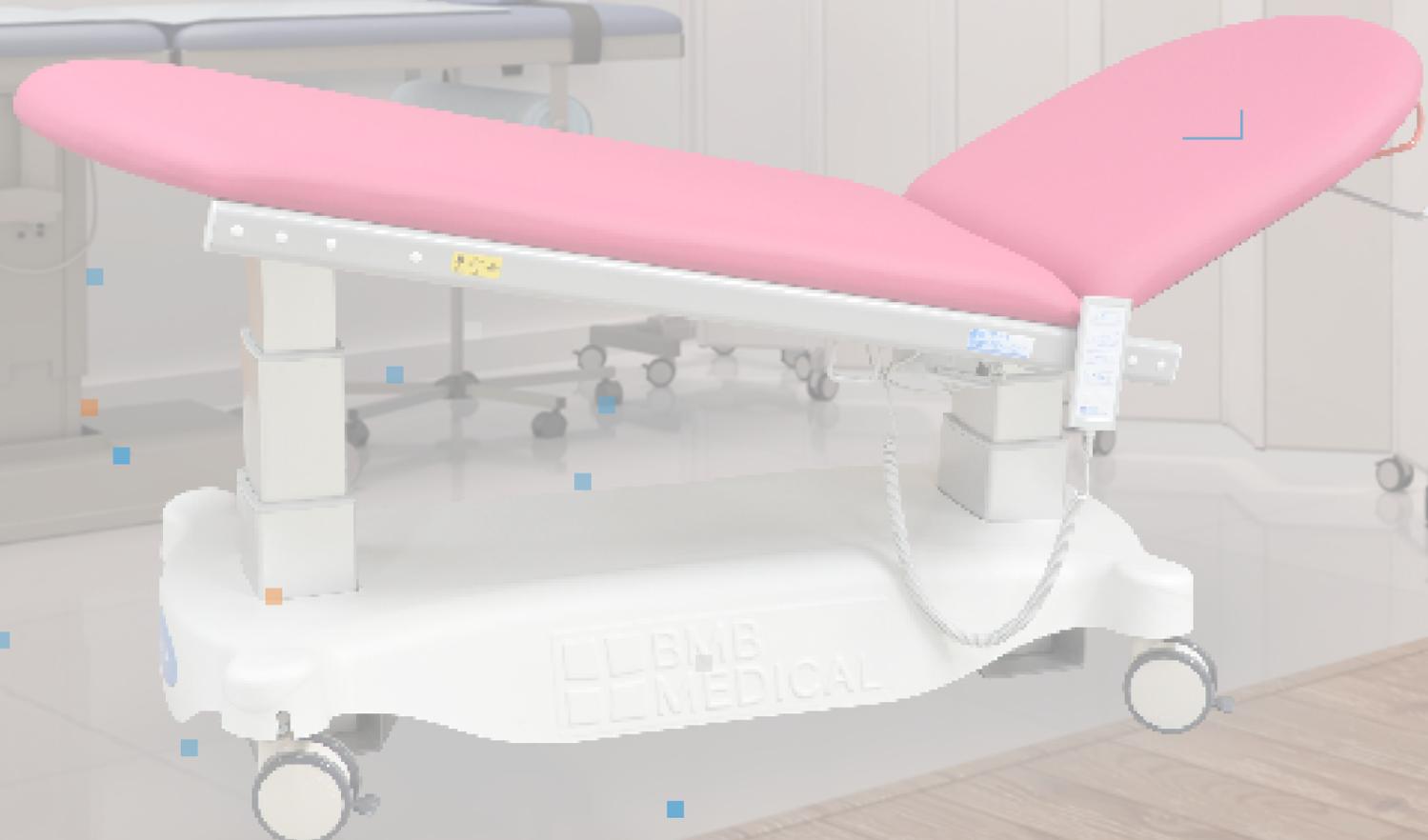

Stabilité

Usage intensif

Facile d'utilisation hauteur variable électrique



DIVAN À HAUTEUR VARIABLE DIVIA

DIVIA est un divan d'examen à hauteur variable électrique, sur colonnes.

Le divan est particulièrement adapté aux services urgences et aux usages intensifs.



DIMENSIONS DIVIA

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	205 cm	73 ou 75 cm (selon modèle)	47 à 87 cm
COUCHAGE	65 x 200 cm ou 75 x 200 cm		
INCLINAISON RELEVÉ-BUSTE	0 à 80°		

POIDS PRODUIT : 80 ou 85 Kg (selon modèle)
 POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 250 Kg



Divan d'examen à hauteur variable électrique sur colonnes.


- Hauteur variable électrique : 47 à 87 cm
- Proclive - déclive électrique (+/- 15°)
- Relève-buste 0 à 80° assisté par 2 vérins à gaz.
- Couchage 2 sections : 65 x 200 cm ou 75 x 200 cm
- Sellerie plate de densité 35 kg/m³ - Epaisseur 6,5 cm
- Structure acier très résistante revêtement époxy coloris gris clair
- Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan
- Capot de protection de châssis
- Télécommande manuelle
- 4 roues double galets à frein indépendant Ø 125 mm
- Support rouleau drap d'examen côté tête
- Revêtement jersey enduit PVC antibactérien et non feu M1
- Gamme de coloris URBAN



Télécommande manuelle



Hauteur variable électrique : 47 à 87 cm

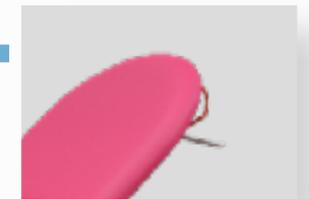

Support rouleau drap d'examen côté tête



Proclive - déclive électrique (+/- 15°)

Revêtements Simili : TEXTILE URBAN




URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau



Notre gamme DIVAN D'EXAMEN est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

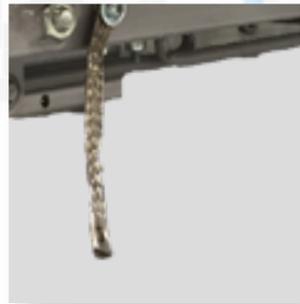

Système antistatique
DVRA



Roues Ø 125 mm
à commande centralisée
DVRS1



Roues Ø 150 mm double
galets à commande centralisée
DVRS2



Relève-buste électrique
DVRBE



Télécommande sans fil
(en plus de la télécommande filaire)
DVTSF



Commande par pédale (en plus de la
télécommande filaire) Si l'on choisi
DVTAP et DVTSF, alors la télécommande filaire
manuelle de base est supprimée
DVTAP




Barrières latérales
escamotables (la paire)
DVBR




Support étaux (la paire)
DVSE



Etau pour fixation d'étriers, de
gouttières ou de support jambes
(la paire) (DVSE obligatoire)
DVETU

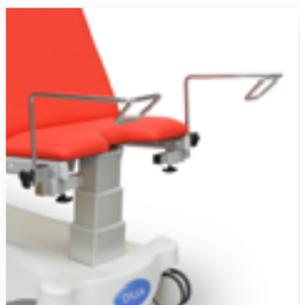

Etriers (la paire)
(DVETU obligatoire)
DVET

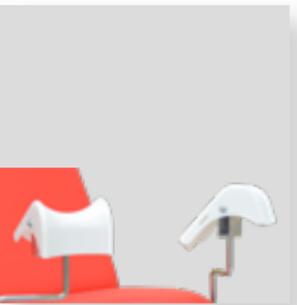

Supports jambes (la paire) (DVE-
TU obligatoire)
DVSJ



TTige porte sérum amovible 2
crochets, réglage par molette
(DVTSR obligatoire)
TSR2

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DVRA	Système antistatique
DVRS1	Roues Ø 125 mm à commande centralisée
DVRS2	Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée
DVRBE	Relève-buste électrique (vérins électrique)
DVTSF	Télécommande sans fil (en plus de la télécommande filaire)
DVTAP	Commande par pédale en plus de la télécommande manuelle SI l'on choisi DVTAP et DVTSF, alors la télécommande filaire manuelle de base est supprimée
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)
DVSE	Support étaux (la paire)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire) (DVSE obligatoire)
DVET	Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)
GT	Gouttière pour prélèvement (DVETU obligatoire)
DVSJ	Supports jambes (la paire) (DVETU obligatoire)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)
DVTSR	Etaux support tige porte sérum (la paire) (DVSE obligatoire)
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets (DVTSR obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
DVPC7	Protection crystal pour divan largeur 65 cm
DVPC8	Protection crystal pour divan largeur 75 cm
DVBBA	Batterie d'autonomie
DVLAMP	Lampe d'examen (DVETU et DVSE obligatoire)
EQUI	Prise d'équipotentialité
DVRT	Rails techniques latéraux (DVSE obligatoire)

Usage intensif

Polyvalent adapté aux examens gynécologiques

Facile d'utilisation Relève-buste et hauteur variable électriques



DIVAN ÉLECTRIQUE GYNÉCO DIVIA MIXTE

DIVIA est un divan d'examens gynécologiques à hauteur variable électrique, sur colonnes.

Il dispose d'un deuxième relève-buste intermédiaire à commande électrique, pour les examens gynécologiques.



DIVIA MIXTE

DIMENSIONS DIVIA MIXTE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	190 cm	73 ou 75 cm (selon modèle)	47 à 87 cm
COUCHAGE	65 x 188 cm ou 75 x 188 cm		
INCLINAISON RELEVÉ-BUSTE	0 à 80°		

POIDS PRODUIT : 85 ou 90 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 250 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme DIVAN D'EXAMENS est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Divan d'examens à hauteur variable pour examens gynécologiques.

- Electric height adjustment : 47 - 87 cm
- Electric assisted Trendelenburg / reverse Trendelenburg +/- 15°
- Electric adjustable backrest 0 - 80°
- 3-sectional mattress base : 65 x 188 cm or 75 x 188 cm
- Flat upholstery, high density foam 35 kg/m³. Width 6,5 cm
- Steel structure, epoxy coated (light grey)
- Frame with 2 electric columns providing great stability
- Frame protection cover
- Remote control
- 4 lockable double running wheels Ø 125 mm
- Examination towel dispenser head end
- Jersey with PVC coating, antibacterial and anti-fire (M1) treatment
- URBAN color range




Télécommande manuelle



Hauteur variable électrique : 47 à 87 cm



Proclive - déclive électrique (+/- 15°)

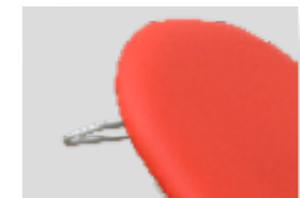

Support rouleau drap d'examen côté tête


Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau



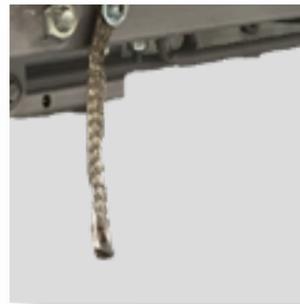

Systeme antistatique
DVRA



Roues Ø 125 mm
à commande centralisée
DVRS1




Roues Ø 150 mm double
galets à commande centralisée
DVRS2

ACCESSOIRES



Lampe d'examens
(DVETU obligatoire)
DVLAMP

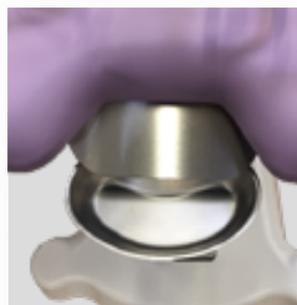

Bac de récupération
DVMB



Barrières latérales
escamotables (la paire)
DVBR


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
DVRA	Systeme antistatique
DVRS1	Roues Ø 125 mm à commande centralisée
DVRS2	Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée
DVTSF	Télécommande sans fil
DVTAP	Commande par pédale en plus de la télécommande manuelle SI l'on choisi DVTAP et DVTSF, alors la télécommande filaire manuelle de base est supprimée
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)
DVSE	Support étaux (la paire)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire) (DVSE obligatoire)
DVET	Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)
DVSJ	Supports jambes (la paire) (DVETU obligatoire)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)
GT	Gouttière pour prélèvement (DVETU obligatoire)
DVTSR	Etaux support tige porte sérum (la paire) (DVSE obligatoire)
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets (DVTSR obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
DVBBA	Batterie d'autonomie
DVLAMP	Lampe d'examens (DVETU et DVSE obligatoire)
DVMB	Bac de récupération - Peut contenir jusqu'à 0,4 litre
EQUI	Prise d'équipotentialité
DVRT	Rails techniques latéraux (DVSE obligatoire)




Support étaux (la paire)
DVSE



Etau pour fixation d'étriers, de
gouttières ou de support jambes
(la paire) (DVSE obligatoire)
DVETU

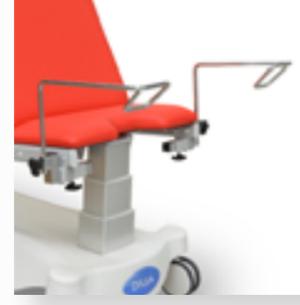

Etriers (la paire)
(DVETU obligatoire)
DVET

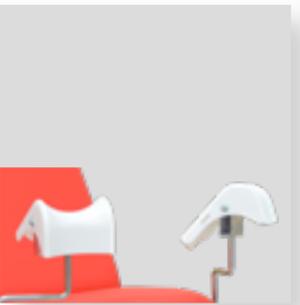

Supports jambes (la paire)
(DVETU obligatoire)
DVSJ



Tige porte sérum amovible 2
crochets, réglage par molette
(DVTSR obligatoire)
TSR2



Coussin repose-tête confort gris
ACC-CTG


TEXTILE URBAN M1



ABSINTHE




TOMATE

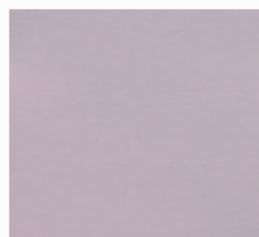


PENSÉE




FUCHSIA

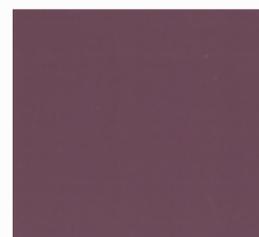

PRUNE

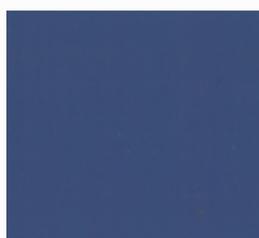

ABYSSE

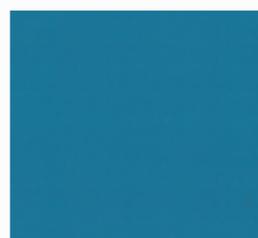

PÉTROLE



GRIS



CLASSEMENT FEU

M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

Petit grain mat et fin au toucher doux.

Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%

Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%

Tenue à la lumière : >= 6

Abrasion martindale : 100 000 cycles


Imperméable à l'eau

Sans Phtalates

Efficace contre les bactéries (MRSA)



Efficace contre les bactéries (MRSA)

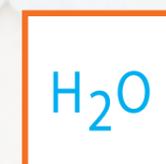

Absence de solvants



Classement au feu



Abrasion martindale 100000 cycles



Sans Phtalates



Imperméable à l'eau

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé. Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.

BMB MEDICAL – 100 Avenue du Formans – CS 11001 – 01604 TREVOUX CEDEX – FRANCE

Tel : +33 474 08 71 71 – Fax : +33 474 08 71 72 – email : info@bmb-medical.com

Sarl au capital de 600 000 € - RCS Bourg en Bresse 89B652

SIRET : 950 413 229 00036 – Code NAF : 3250A – Code TVA : FR68 950 413 229

www.bmb-medical.com



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001

01604 TREVOUX Cedex

FRANCE

www.bmb-medical.com