


FAUTEUILS HOTELEIERS REPOS & SOINS



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des "manques" en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.

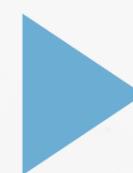

S O M M A I R E

▶ C A R E X I A F P

▶ C A R E X I A F P E

▶ C A R E X I A F P U

▶ C A R E X I A F P U E

▶ T I M

▶ V E L V E T

▶ S W A N N

▶ N U A N C I E R



FAUTEUIL À HAUTEUR FIXE CAREXIA FP

Confortable

Facile d'utilisation

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Carexia FP, est un fauteuil de soins aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



CAREXIA FP

DIMENSIONS CAREXIA FP

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	77 cm (replié) 170 cm (ouvert)	70 cm 90 cm (avec gouttières)	130 cm
ASSISE	50 cm	55 cm	54 cm sur assise
INCLINAISON DOSSIER	80 à 60°		

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil de soins polyvalent manuel

- Dossier inclinable de 80 à 60° assisté par ressort à gaz
- Hauteur fixe 54 cm sur assise
- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique.
- Revêtement PVC non feu M1
- Gamme de coloris URBAN




4 roulettes double galets à freinage indépendant



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière




Capot de chassis en ABS avec panier à effets

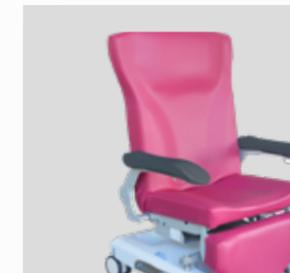

Repose tête intégré

Revêtements Simili : TEXTILE URBAN

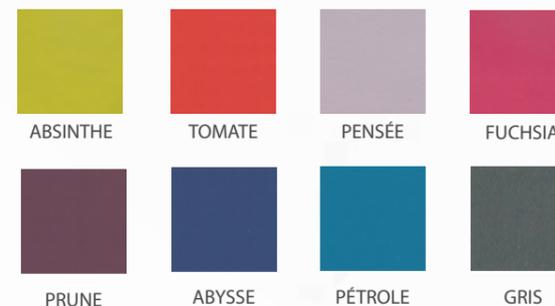

URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau





4 roues à commande centralisée Ø 125mm.
FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm
FPORS2




Barre de poussée et support rouleau
FPOBP & FPOSR



Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier. Dossier inclinable jusqu'à la position décline.
FPORJ



2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
FPOSA

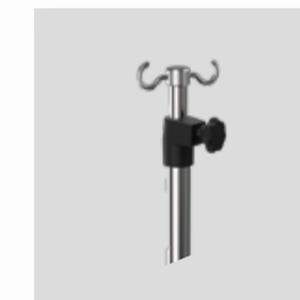


Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2



Coussin repose-tête confort gris.
ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire)
FPOAC4

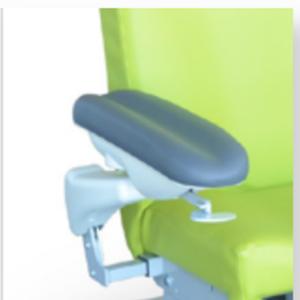

Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)
FPOAC3

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FPORS1	4 roues à commande centralisée 125
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée 150
FPOBP	Barre de poussée
FPORJ	Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier Dossier inclinable jusqu'à la position décline. (Vérins à gaz)
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable (FPOSA obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
FPOAC4	Accoudoirs confort
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur
FPOSR	Support rouleau papier
FPOGC	Garniture Ultra Confort Couche de 2 cm de mousse viscoélastique
SUPTAB	Support Ipad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol



FAUTEUIL À HAUTEUR FIXE CAREXIA FPE

Carexia FPE, est un fauteuil de soins à dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés et aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Facile d'utilisation mouvements électriques

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers




CAREXIA FPE

DIMENSIONS CAREXIA FPE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	77 cm (replié) 170 cm (ouvert)	70 cm 90 cm (avec gouttières)	130 cm
ASSISE	50 cm	55 cm	54 cm sur assise
INCLINAISON DOSSIER	26° à 83°		

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg

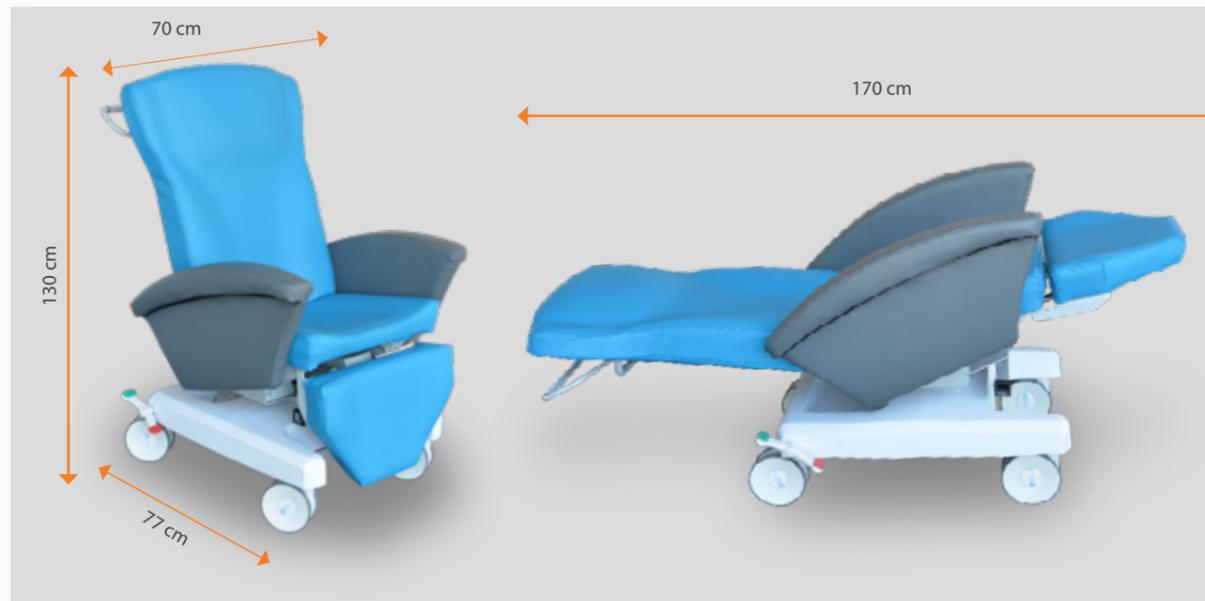

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil de soins polyvalent à mouvements électriques

- Hauteur fixe 54 cm sur assise
- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés (Vérins électrique)
- Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse HR 35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique
- Revêtement PVC non feu M1
- Gamme de coloris URBAN



4 roulettes double galets à freinage indépendant



Capot de chassis en ABS avec panier à effets



Repose tête intégré



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau






ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FPORS1	4 roues à commande centralisée 125
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée 150
FPOBP	Barre de poussée
FPORJL	Relève-jambes long (Vérins électrique)
FPORP	Repose pieds pour RJ long (incompatible avec FPOAC4)
FPOCP1	Mise en position relax puis décline à commande au pied bilatérale.
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable (FPOSA obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
FPOAC4	Accoudoirs confort (incompatible avec FPORP)
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur
FPOSR	Support rouleau papier à la tête
FPOGC	Garniture Ultra Confort : Couche de 2 cm de mousse viscoélastique
FPOLAMP	Lampe de lecture LED
FPOBA	Batterie 2 Ah
SUP-USB	Support de charge USB
PROTEC RJL	Protection Crystal amovible pour relève-jambes long
PROTEC RP	Protection Crystal amovible pour repose-pieds
SUPTAB	Support Ipad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol

ACCESSOIRES

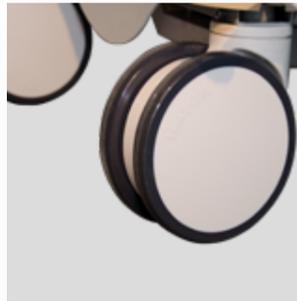

4 roues à commande centralisée Ø 125mm. FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm FPORS2



Barre de poussée et support rouleau FPOBP & FPOSR



Relève jambes long & Re-pose pieds pour RJ long (incompatible avec FPOAC4) FPORJL & FPORP



Mise en position relax puis déclive à commande au pied bilatérale. FPOCP1



2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2) FPOSA



Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire) TSR2



Coussin repose-tête confort gris. ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire) FPOAC4




Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire) FPOAC3



Lampe de lecture (incompatible avec SUP-USB) FPOLAMP



Support de charge USB (incompatible avec FPOLAMP) SUP-USB

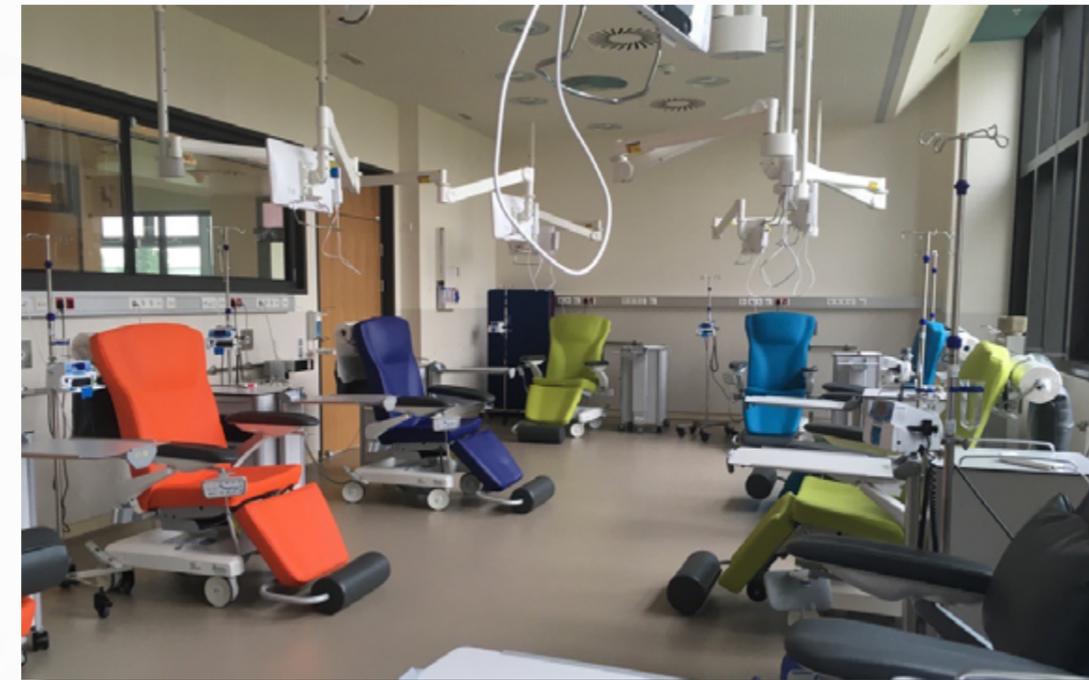



FAUTEUIL À HAUTEUR VARIABLE CAREXIA FPU

Confortable

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation hauteur variable électrique

Carexia FPU, est un fauteuil de soins polyvalent aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.




CAREXIA FPU

DIMENSIONS CAREXIA FPU

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	77 cm (replié) 170 cm (ouvert)	70 cm 90 cm (avec gouttières)	130 cm
ASSISE	50 cm	55 cm	54 cm sur assise
INCLINAISON DOSSIER	70° à 83°		
HAUTEUR VARIABLE			De 54 à 78 cm

PRODUIT POIDS : 65 à 85 Kg en fonction du modèle
 POIDS MA X PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg

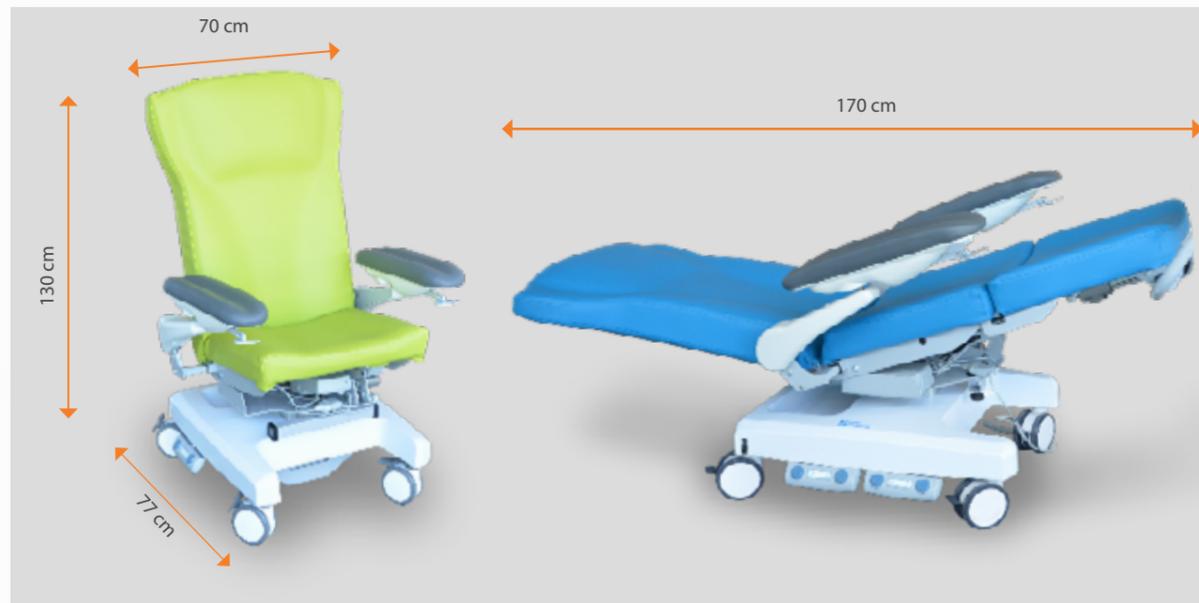

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOSE ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil de soins à hauteur variable électrique

- Hauteur variable sur colonne électrique de 54 à 78 cm (hauteur sol / assise) (Vérins électrique)
- Dossier inclinable de 70° à 83° assisté par ressort à gaz
- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière
- Mousse HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique
- Revêtement PVC non feu M1



4 roulettes double galets à freinage indépendant



Repose tête intégré




Capot de chassis en ABS avec panier à effets



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière


Revêtements Simili : TEXTILE URBAN

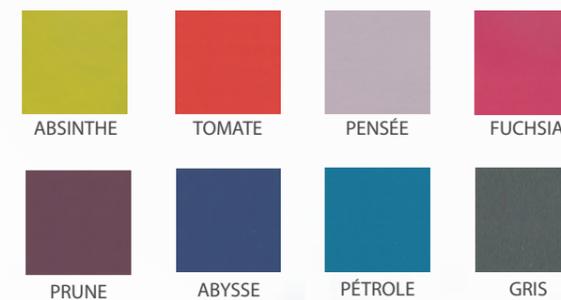

URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau



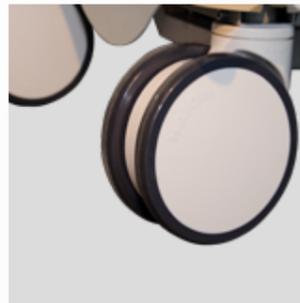

4 roues à commande centralisée Ø 125mm.
FPORS1




4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm
FPORS2



Barre de poussée et support rouleau
FPOBP & FPOSR



Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier. Dossier inclinable jusqu'à la position décline.
FPORJ

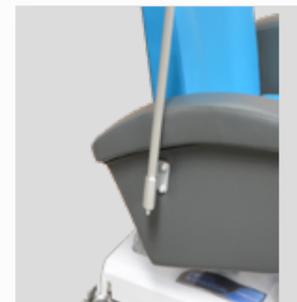

2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
FPOSA



Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)
TSR2



Coussin repose-tête confort gris.
ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire)
FPOAC4



Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)
FPOAC3



Support de charge USB (incompatible avec FPOLAMP)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FPORS1	4 roues à commande centralisée 125
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée 150
FPOBP	Barre de poussée
FPORJ	Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier Dossier inclinable jusqu'à la position décline. (Vérins à gaz)
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable (FPOSA obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
FPOAC4	Accoudoirs confort
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur
FPOSR	Support rouleau papier à la tête
FPOGC	Garniture Ultra Confort - Couche de 2 cm de mousse viscoélastique
FPOBA	Batterie 2 Ah
SUP-USB	Support de charge USB
SUPTAB	Support Ipad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol



FAUTEUIL À HAUTEUR VARIABLE CAREXIA FPVE

Confortable

Fauteuil tout électrique

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation Hauteur variable et mouvements électriques

Carexia FPVE, est un fauteuil de soins à hauteur variable sur colonne électrique, dossier et relève-jambes électrique et aux formes douces et accueillantes qui apportent confort, relaxation et sérénité au patient.


Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.



CAREXIA FPUÉ

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	77 cm (replié) 177 cm (ouvert) + repose-jambes long	70 cm 90 cm (avec gouttières)	130 cm
ASSISE	50 cm	55 cm	54 cm sur assise
INCLINAISON DOSSIER	26° à 83°		
HAUTEUR VARIABLE			De 54 à 78 cm

POIDS PRODUIT : 65 à 85 Kg en fonction du modèle
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 200 Kg

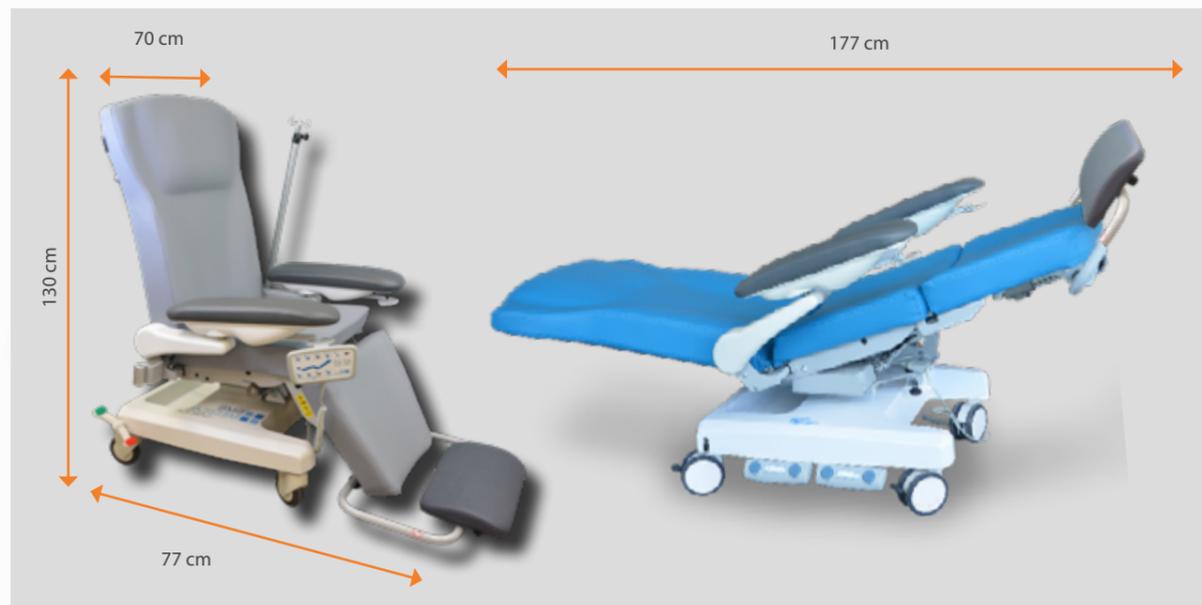

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Médecine, Oncologie et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil de soins à hauteur variable électrique

- Hauteur variable sur colonne électrique de 54 à 78 cm (hauteur sol /assise) (Vérins électrique)
- Piétement en acier haute résistance mécano soudé - Revêtement anticorrosion époxy cuit au four
- Repose tête intégré
- Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés (Vérins électrique)
- Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande
- Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant
- Capot de chassis en ABS avec panier à effets
- Mousse HR35 kg/m3 sur support rigide
- Assise et dossier en forme ergonomique - Revêtement PVC non feu M1
- Gamme de coloris URBAN



4 roulettes double galets à freinage indépendant



Capot de chassis en ABS avec panier à effets



Repose tête intégré



Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande.



Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

Revêtements Simili : TEXTILE URBAN



URBAN
 Petit grain mat et fin au toucher doux.
 Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
 Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%
 Efficace contre les bactéries (MRSA)
 Sans Phtalates
 Absence de solvants
 Abrasion martindale 100 000 cycles
 Imperméable à l'eau



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FPORS1	4 roues à commande centralisée Ø 125 mm
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée Ø 150 mm
FPOBP	Barre de poussée
FPORJL	Relève jambes long (vérins électrique)
FPORP	Repose pieds pour RJ long (incompatible avec FPOAC4)
FPOCP1	Mise en position relax puis décline à commande au pied bilatérale (Vérins électrique)
FPOCP2	Hauteur variable à commande supplémentaire au pieds bilatérale (Vérins électrique)
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris
FPOAC4	Accoudoirs confort (la paire)
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)
FPOSR	Support rouleau papier
FPOGC	Garniture Ultra Confort - Couche de 2 cm de mousse viscoélastique
FPOLAMP	Lampe de lecture
FPOBA	Batterie 2 Ah.
SUP-USB	Support de charge USB
PROTEC RJL	Protection Crystal amovible pour repose-jambes long
PROTEC RP	Protection Crystal amovible pour repose-pieds
SUPTAB	Support I-Pad inamovible (côté droit ou gauche au choix) avec système antivol



ACCESSOIRES



4 roues à commande centralisée Ø 125mm.
FPORS1



4 roues double galets à commande centralisée Ø 150mm
FPORS2




Barre de poussée et support rouleau
FPOBP & FPOSR




Relève jambes long & Repose pieds pour RJ long (incompatible avec FPOAC4)
FPORJL & FPORP



FPOCP1 & FPOCP2

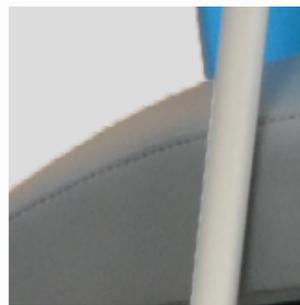

2 emplacements pour tige à sérum (obligatoire si TSR2)
FPOSA

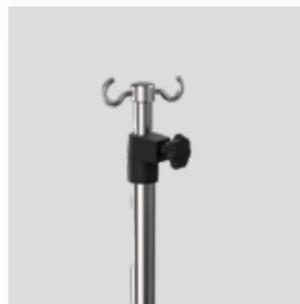

Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FPOSA obligatoire)
TSR2



Coussin repose-tête confort gris.
ACC-CTG



Accoudoirs confort (la paire)
FPOAC4



Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur. (la paire)
FPOAC3



Lampe de lecture (incompatible avec SUP-USB)
FPOLAMP



Support de charge USB (incompatible avec FPOLAMP)
SUP-USB



FAUTEUIL MANUEL TIM

Adaptable, nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Personnalisable, choisissez piétements et accoudoirs

Facile d'utilisation, positions programmées manuellement

Le TIM est un fauteuil manuel de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le TIM est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



TIM



TIM

DIMENSIONS TIM

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
HORS TOUT	85 cm (fauteuil) 153 (allongée)	73 cm 80 cm (avec accoudoirs aluminiums)	115 cm	
ASSISE		57 cm	50 cm	55 cm
REPOSE-JAMBES	44 cm	57 cm		
DOSSIER	76 cm	55 cm		
REPOSE-TÊTE	29 cm	55 cm		16 cm

POIDS PRODUIT : 35 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 115 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 130 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil manuel avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.

- Relève-buste et repose-jambes assistés synchronisés jusqu'à la position confort (Vérin d'assistance à gaz)
- Le relève-buste s'incline indépendamment jusqu'à la position de récupération
- Châssis en tube d'acier renforcé
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux
- Accoudoirs confortables amovibles
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Chassis tubulaire :
 - Avant : 2 patins réglables,
 - Arrière : 2 roulettes (Ø50 mm)
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité
- Gamme de coloris VALENCIA : Revêtement M2 non feu, 10 coloris




Chassis tubulaire :
 Avant : 2 patins réglables
 Arrière : 2 roulettes (Ø50 mm)

Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise



Accoudoirs confortables amovibles

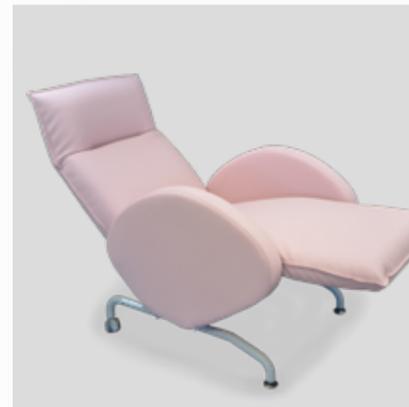

Relève-buste et repose-jambes synchronisés





Appui-tête orientable par système à crémaillère



Revêtement M2 non feu
Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité




Revêtements Simili : VALENCIA M2

APAISANT



RAFRAICHISSANT

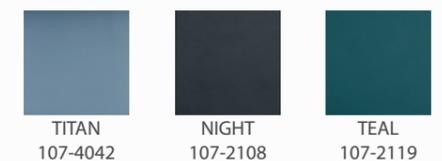

ÉNERGISANT



Composition : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face
Épaisseur : 1,1 mm
>300.000 cycles Martindale
Finitions anti-tâches et résistant aux tâches de sulfure
Efficace contre les bactéries
Sans Phtalates
Finition antistatique

CLASSEMENT FEU M2



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort,ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

TIM

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FA007	Lampe de lecture + Port USB
FA021	Accoudoirs aluminium fixes
FA025	Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm
FA030	Piètement étoile : 3 roues Ø50mm + 2 patins fixes à l'avant
FA019	Piètement socle en inox Ø 690 mm
FA031	Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA034	Protection crystal pour relève-jambes



ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB
FA007



Accoudoirs aluminium fixes
FA021



Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA031



Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants
Ø50mm
FA025



Piètement socle en inox
Ø 690 mm
FA019



Piètement tubulaire 2 roulettes arrières + 2 patins avant
FA030



Protection crystal pour relève-jambes
FA034





FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VELVET

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation, positions programmées électriquement

Le VELVET est un fauteuil électrique de repos adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le VELVET est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



VELVET

DIMENSIONS VELVET

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	100 cm (replié) 177 cm (ouvert) 185 cm (déclive)	82 cm (avec accoudoirs ALU) 74 cm (avec accoudoirs pleins)	125 cm en position assise
ASSISE	53 cm	57 cm	51 cm
REPOSE-JAMBES	40 cm	57 cm	
DOSSIER	82 cm	57 cm	
REPOSE-TÊTE	32 cm	55 cm	

POIDS PRODUIT : 40 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 145 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 160 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSORISÉS

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.


Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil électrique avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.


- Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques. (Vérins électrique)
- Châssis en tube d'acier renforcé, revêtement époxy
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux à déplacement combiné
- Accoudoirs avec rembourrage de 7 cm en mousse HR et "à mémoire de forme" fixés sur structures en aluminium
- Assise frontale
- Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise
- Hauteur fixe
- Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants
- Porte télécommande
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité
- Gamme de coloris VALENCIA : Revêtement M2 non feu, 10 coloris




Piètement étoile sur roulettes ø 75 mm à freins indépendants

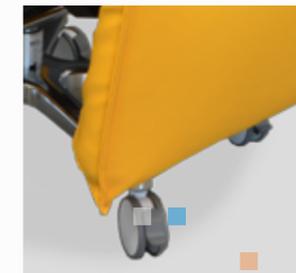

Dégagement total de la partie "jambes" sous l'assise

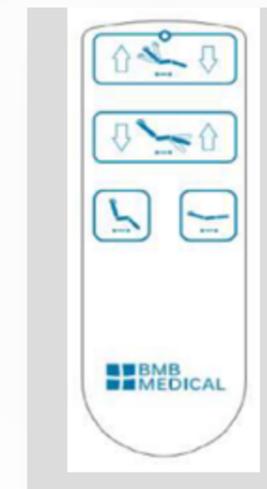

Relève-buste et repose-jambes indépendants électriques.

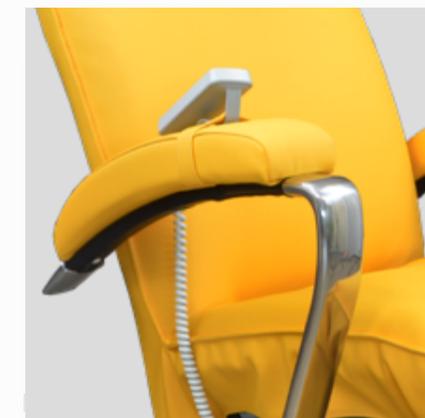


Accoudoirs en aluminium avec sangle pour télécommande

VELUET

Appui-tête orientable par système à crémaillère



Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité

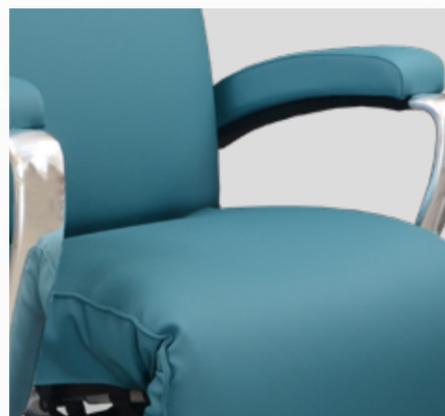

Revêtement M2 non feu



Revêtements Simili : VALENCIA M2

APAISANT



GRAPHITE
107-4003



TAUPE
107-0034



SISAL
107-1048



ROSÉ
107-2114

RAFRAICHISSANT



TITAN
107-4042



NIGHT
107-2108



TEAL
107-2119

ÉNERGISANT



OLIVE
107-5001



NECTARINE
107-6003




SAFRAN
107-6012

Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Composition : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face
Épaisseur : 1,1 mm
>300.000 cycles Martindale
Finitions anti-tâches et résistant aux tâches de sulfure
Efficace contre les bactéries
Sans Phtalates
Finition antistatique

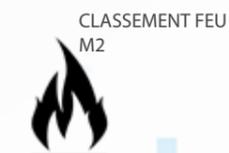

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FA006	Déclive électrique d'urgence sur télécommande
FA007	Lampe de lecture + Port USB
FA0088V	Support bilatéral pour tige porte sérum (incompatible FA022)
FA011	Porte-rouleau de drap d'examen
FA015B	Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA022	Accoudoirs "pleins" de confort AMOVIBLES (la paire) incompatible avec FA018V-G/D
FA031	Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA009P	Petite tablette repas : 42 x 32 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)
FA009G	Grande tablette repas : 81 x 41 cm (FA018V-D ou FA018V-G obligatoire)
FA018V-D	Support pour tablette repas à droite du patient (compatible avec le FA018V-G)
FA018V-G	Support pour tablette repas à gauche du patient (compatible avec le FA018V-D)
FA025	Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm
FA033	Piètement tubulaire 2 roulettes arrière + 2 patins avant
FA019	Piètement socle en inox Ø 690 mm
FA034	Protection crystal pour relève-jambes
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette (FA0088VE obligatoire)
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette (FA0088VE obligatoire)

ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB
FA007



Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA031



Déclive électrique d'urgence sur télécommande
FA006



Petite tablette repas : 42 x 32 cm
(FA018V obligatoire)
FA009P



Grande tablette repas : 81 x 41 cm
(FA018V obligatoire)
FA009G



Support tablette repas
seul pour VELVET
FA018V-D ou FA018V-G



Porte-rouleau de drap d'examen
FA011



Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA015B




Accoudoirs «pleins» de confort AMOVIBLES (la paire)
Incompatible avec FA018V
FA022




Supports bilatéraux pour tige porte sérum
FA008VE



Protection crystal pour relève-jambes
FA034

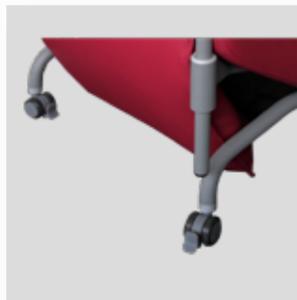

Piètement tubulaire avec 4 roulettes à freins indépendants Ø50mm
FA025

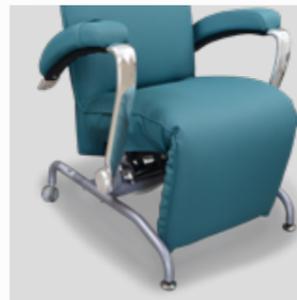

Piètement tubulaire 2 roulettes arrières + 2 patins avant
FA033



Piètement socle en inox Ø 690 mm
FA019





FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SWANN

Le SWANN est un fauteuil électrique de soins adapté à différents pôles hospitaliers.

Sa conception ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort exceptionnel au patient.

Le SWANN est un fauteuil polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux opérations des équipes médicales.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil de soins, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.

Adaptable nombreuses options disponibles

Polyvalent, Adapté à différents pôles hospitaliers

Facile d'utilisation, positions programmées électriquement



DIMENSIONS SWANN

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	104 cm (replié) 183 cm (ouvert)	80 cm	131 cm en position assise
ASSISE	53 cm	57 cm	54 à 84 cm
REPOSE-JAMBES	40 cm	57 cm	
DOSSIER	86 cm	55 cm	
REPOSE-TÊTE	32 cm	55 cm	

POIDS PRODUIT : 80 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 145 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 160 Kg



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Fauteuil électrique avec structure en acier. L'intégralité des coussins sont escamotables pour le nettoyage ou les réparations.


- Chassis tubulaire à hauteur fixe
- 2 roues arrières Ø 125mm pivotantes, à freins indépendants
- 2 roues avants Ø 125mm non pivotantes
- Déclive d'urgence électrique actionnée par télécommande
- Accoudoirs en aluminium
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- 2 supports pour tige à sérum télescopique
- Relève-buste et relève-jambe électriques (vérins électrique)
- Poignée de poussée
- Jersey enduit PVC
- Gamme de coloris VALENCIA : Revêtement M2 non feu, 10 coloris




2 roues arrières Ø 125mm pivotantes, à freins indépendants



2 roues avants Ø 125mm non pivotantes

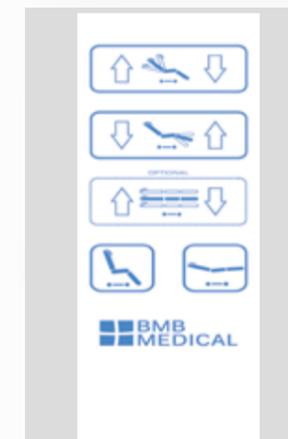

Déclive d'urgence électrique actionnée par télécommande

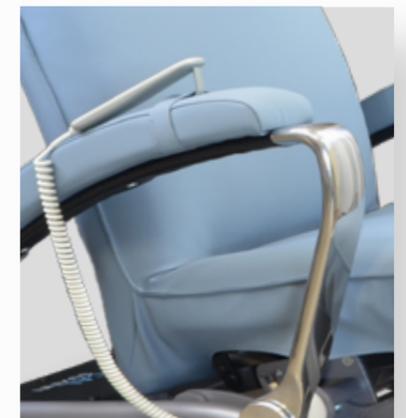


Accoudoirs en aluminium avec sangle pour télécommande

SWANN



Appui-tête orientable par système à crémaillère

Relève-buste et relève-jambe électriques.

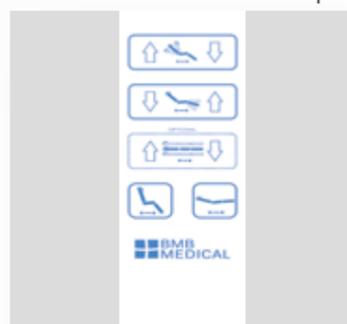

Poignée de poussée

Revêtement M2 non feu



2 supports pour tige à sérum télescopique



Notre gamme FAUTEUILS DE REPOS ET DE SOINS est adaptée aux services de Chirurgie ambulatoire, Soins de jour, Cancérologie, Médecine et Dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.




Revêtements Simili : VALENCIA M2

APAISANT



RAFRAICHISSANT

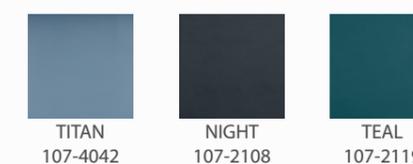

ÉNERGISANT



Composition : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face
 Epaisseur : 1,1 mm
 >300.000 cycles Martindale
 Finitions anti-tâches et résistant aux tâches de sulfure
 Efficace contre les bactéries
 Sans Phtalates
 Finition antistatique



SWANN



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
FA007	Lampe de lecture + Port USB
FA008	Tige à sérum
FA010	Batterie
FA011	Porte-rouleau de drap d'examen
FA012	Gouttière pour prélèvement - Dimensions 400/200/40 mm (FA012S + FA015 ou FA015B obligatoire)
FA012S	Supports pour gouttière de prélèvement - La paire (FA015 ou FA015B obligatoire)
FA014	Hauteur variable électrique (vérins électrique)
FA014R	Hauteur variable avec releveur (vérins électrique)
FA017	Pédale de déclive aux pieds bi-laterale (Hauteur variable obligatoire FA014)
FA015	Accoudoirs escamotables (la paire) 3 positions (FA014 obligatoire)
FA015B	Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA009P	Petite tablette repas : 42 x 32 cm (FA018S-D ou FA018S-G obligatoire)
FA009G	Grande tablette repas : 81 x 41 cm (FA018S-D ou FA018S-G obligatoire)
FA018S-D	Support pour tablette repas à droite du patient (compatible avec le FA018S-G)
FA018S-G	Support pour tablette repas à gauche du patient (compatible avec le FA018S-D)
FA026	Blocage centralisé des roues arrières par pédale Ø 150 mm doubles galets
FA029	2 roues pivotantes a l'avant doubles galets avec freins Ø 100mm
FA027	Faisceau lumineux au sol
FA031	Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA034	Protection crystal amovible pour relève-jambes

ACCESSOIRES



Lampe de lecture + port USB



Coussin cylindrique de calage de la nuque
FA031



Batterie
FA010



Petite tablette repas : 42 x 32 cm
(FA018S obligatoire)
FA009P



Grande tablette repas : 81 x 41 cm
(FA018S obligatoire)
FA009G




Support tablette repas seul pour SWANN
FA018S-D ou FA018S-G



Porte-rouleau de drap d'examen
FA011




Gouttière pour prélèvement + Supports
FA012 - FA012S

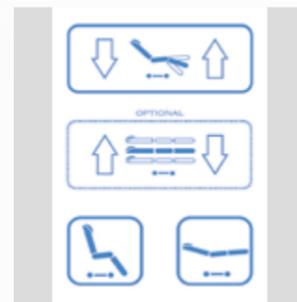


Hauteur variable électrique
FA014




Hauteur variable avec Releveur
FA014R

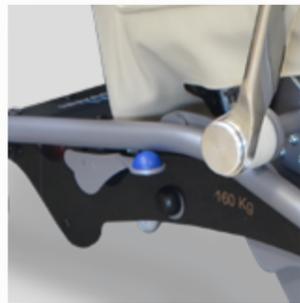


Pédale de déclive aux pieds bi-laterale
FA017

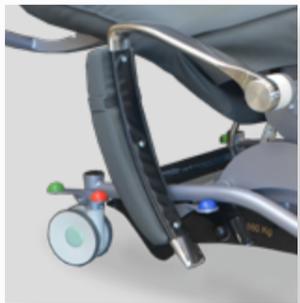

Accoudoirs escamotables (la paire)
3 positions
(FA014 obligatoire)
FA015

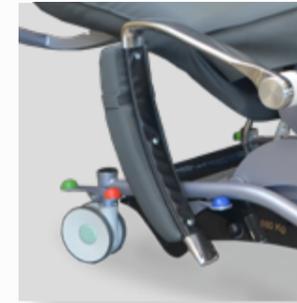


Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions
FA015B

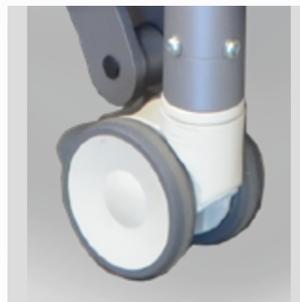

2 roues pivotantes a l'avant doubles galets avec freins Ø 100mm
FA029



Blocage centralisé des roues arrières par pédale Ø 150 mm doubles galets
FA026

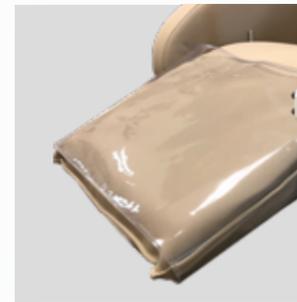

Protection crystal amovible pour relève-jambes
FA034



TEXTILE URBAN M1

GAMME CAREXIA



ABSINTHE



TOMATE



PENSÉE



FUCHSIA



PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS

NUANCIER



CLASSEMENT FEU


M1

Petit grain mat et fin au toucher doux.
Support coton traité imputrescible.

Composition : PVC ingifugé dans la masse 86%, Coton 14%
Épaisseur : 1,04 mm +/- 10%



Efficace contre
les bactéries
(MRSA)

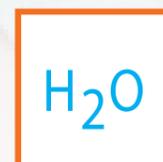

Absence
de solvants



Sans
Phtalates




Abrasion
martindale
100000 cycles



Imperméable
à l'eau

VALENCIA M2

APAISANT

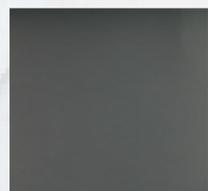

GRAPHITE
107-4003



TAUPE
107-0034




SISAL
107-1048



ROSÉ
107-2114


RAFRAICHISSANT

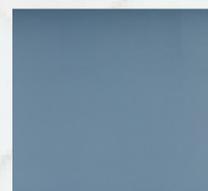

TITAN
107-4042



NIGHT
107-2108

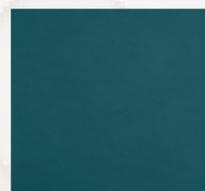

TEAL
107-2119

ÉNERGISANT



OLIVE
107-5001



NECTARINE
107-6003



SAFRAN
107-6012

NUANCIER



CLASSEMENT FEU
M2

COMPOSITION : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face
EPAISSEUR : 1,1mm

FINITIONS ET TRAITEMENTS



Efficace contre
les bactéries
(MRSA)



Finition
antistatique



Sans
Phtalates



Abrasion
martindale
>300000 cycles



Finition anti-tâches
et résistant aux
tâches de sulfure

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.

Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.

Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001

01604 TREVOUX Cedex

FRANCE

www.bmb-medical.com